

10 Vorteile

TIGGES MalleoSet

Modulare Sprunggelenkorthese


HMV-Nummer: 23.02.04.0012



1

Effektive Limitierung des Talusvorschubs

- ventrale Stabilisierung zur Vermeidung von Syndesmose-Verletzungen durch zusätzliche vordere Metallstäbe
- wissenschaftlich nachgewiesene effektivste Limitierung des Talusvorschubs in der PG 23.02.04.0

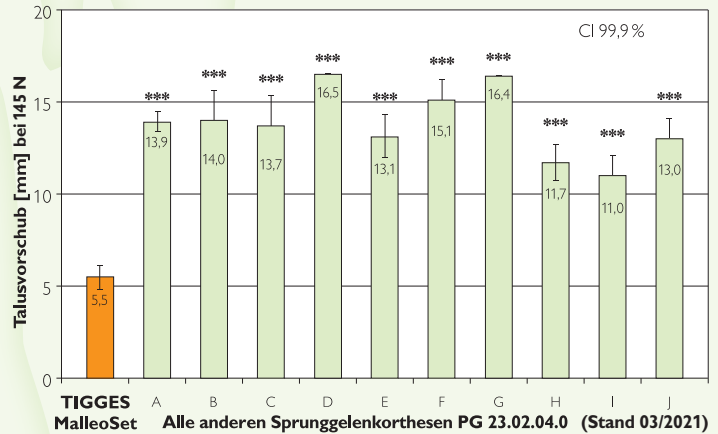

2

3-Stufen-Mobilisierungsfunktion zur Rezidiv-Vermeidung

1. Stufe: Immobilisation in der Entzündungsphase
2. Stufe: kontrollierte Bewegungsfreigabe in der Proliferationsphase
3. Stufe: Abbau zur Sprunggelenkbandage in der Remodulationsphase



1. Therapie-Stufe

2. Therapie-Stufe

3. Therapie-Stufe

3

Leichter Einstieg

- komplettes Aufklappen möglich
- alternativ Front- oder Heckeinstieg
- keine Spitzfußstellung erforderlich



4

Gute Anpassungsmöglichkeiten bei anatomischen Besonderheiten

- 4 individuell veränderbare Stabilisierungsstäbe
- Gurte bei Bedarf leicht kürzbar



5

Hohe Stützwirkung

- längerer Vorfußbereich für **verbesserte Mittelfußstabilität**
- erhöhte Stützwirkung durch die proximale Höhe am Unterschenkel und den anterior langen Vorfußbereich



6

Schmale Bauart für höheren Tragekomfort

- passt in nahezu jeden Schuh, schont den Schuh
- für Sportler geeignet
- gut **kombinierbar mit Einlagen**



7

Optimierte Passform im Knöchelbereich

- ventral und dorsal zum Gelenk positionierte Stabilisierungsstäbe (nicht seitlich am Gelenk) passen sich gut der Fußkontur an
- dadurch **keine Druckstellen** im Knöchelbereich



8

Minimierung akuter Schwellungen


- **gefrieretaugliches Ice-Pack** gemäß RICE-Schema/PECH-Regeln
- 20 Minuten Kühlung und 60 Minuten Regeneration im Wechsel



9

Geringe Lagerhaltung

- **nur 3 Größen**
- seitengleiche Ausführungen für links und rechts

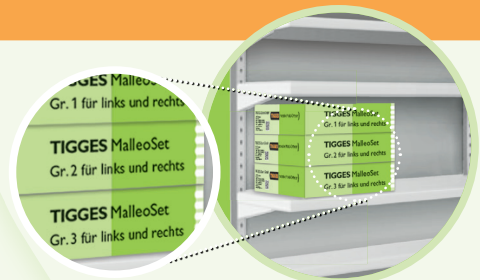

10

Notfallversorgung in Klinik und Praxis möglich

- einfaches und schnelles Anpassen am Fuß
- **Rechtsgutachten** legitimiert Lagerung/Versorgung in Klinik und Praxis



TIGGES innovative Modul-Orthesen

TIGGES-Zours GmbH
 D-45525 Hattingen
 Am Beul 10
 Telefon 00 49 (0) 23 24-5 94 97-0
 Telefax 00 49 (0) 23 24-5 94 97-29
 E-Mail tiggess@zours.de
 Internet www.zours.de



Bitte lesen Sie die
 Datenschutzhinweise
 auf unserer Website.

